



Gebruikershandleiding Mitz toestemming Farmasys 6

Auteur: SmartMed

Datum: mei 2024

Versie: 1.4

Behorend bij Farmasys 6: V6.3.9.001

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Inloggen en startscherm.....	4
2.1	Menuscherf	5
2.2	UZI-pas registreren en mandateren.....	6
2.3	SmartMed Extensies en UZI drivers	8
3	Toestemming Mitz.....	9
3.1	Diensten en toestemmingen.....	9
3.2	Mitz omgeving.....	10
3.3	Keuze Mitz toestemming	12
3.4	Foutmelding en hulp	13
3.4.1	RegistratieToken.....	13

1 Inleiding


Deze handleiding beschrijft de werkwijze van het Mitz toestemmingsproces in Farmasys 6.

Mitz is een online toestemmingsvoorziening. Een voorziening die burgers in staat stelt regie te voeren op hun toestemmingskeuzes. In Mitz leggen burgers toestemmingskeuzes vast voor zorgaanbieders. Met een toestemming kunnen zorgaanbieders het medisch dossier van de burger beschikbaar stellen aan andere zorgaanbieders van die burger.

Mitz is een voorziening van zorgaanbieders om burgers meer regie te geven op de uitwisseling van medische gegevens. Mitz ontzorgt ook de zorgaanbieder in het toestemmingsbeheer. MijnMitz is het portaal waar een burger toestemmingen kan vastleggen en beheren.

2 Inloggen en startscherm

Start FarmaSys 6 en log in met uw e-mailadres en wachtwoord (Figuur 1).

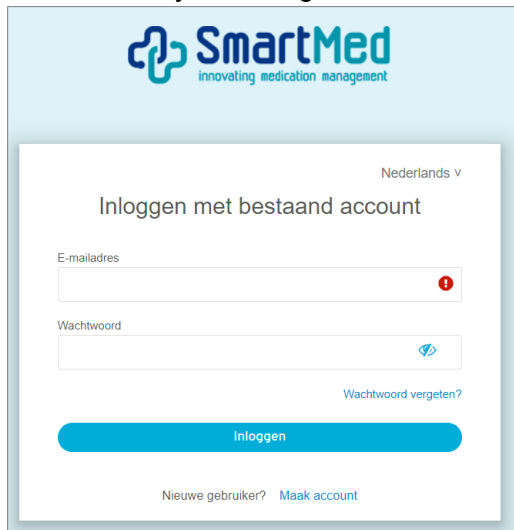


The login screen for FarmaSys 6. It features the SmartMed logo at the top left. The main heading is 'Inloggen met bestaand account'. Below this are two input fields: 'E-mailadres' and 'Wachtwoord'. The 'Wachtwoord' field has an eye icon to toggle visibility. A link 'Wachtwoord vergeten?' is located below the password field. A large blue 'Inloggen' button is centered below the fields. At the bottom, there is a link 'Nieuwe gebruiker? Maak account'.

Figuur 1 Inlogscherm FarmaSys 6

Zie voor meer informatie de *"Gebruikershandleiding SmartMed Algemene Navigatie F6"*.

Na het inloggen bij FarmaSys 6 (F6) komt de gebruiker direct in onderstaand Startscherm F6 (Figuur 2). Zie voor meer informatie de *"Gebruikershandleiding Receptverwerking Farmasys 6"*.

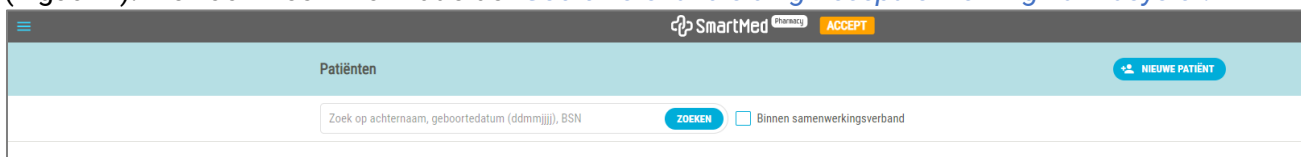


The start screen of FarmaSys 6. It has a dark header with the SmartMed logo and 'ACCEPT' button. Below the header is a light blue bar with the title 'Patiënten' and a 'NIEUWE PATIËNT' button. The main area is white and contains a search bar with the placeholder text 'Zoek op achternaam, geboortedatum (ddmmjjjj), BSN'. To the right of the search bar is a 'ZOEKEN' button and a checkbox labeled 'Binnen samenwerkingsverband'.

Figuur 2 Startscherm F6

2.1 Menuscherf

Links bovenin staat het menu ☰. Voor uitgebreide uitleg over het menu zie ["Gebruikershandleiding SmartMed Algemene Navigatie F6"](#).

Na klikken op het menu ☰ komt onderstaand scherm tevoorschijn (Figuur 3). Hierbij kan worden genavigeerd in het menuscherf.

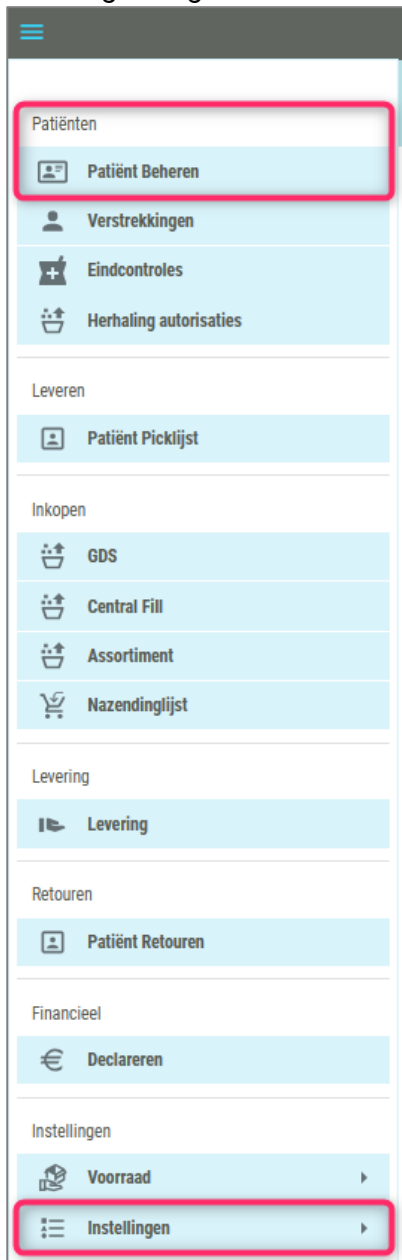


Figuur 3 Menuscherf F6

In de volgende pagina's worden de functionaliteiten van het kopje 'Patiënt Beheren' (in het rode kader) beschreven. Daarnaast dienen eenmalige instellingen te worden uitgevoerd via het "Instellingen" menu.

2.2 UZI-pas registreren en mandateren


Iedere gebruiker dient eerst een eigen pas in SmartMed te registreren. Vanuit het menu , bij 'Instellingen/ LSP' wordt onderstaand scherm weergegeven (zie Figuur 4).

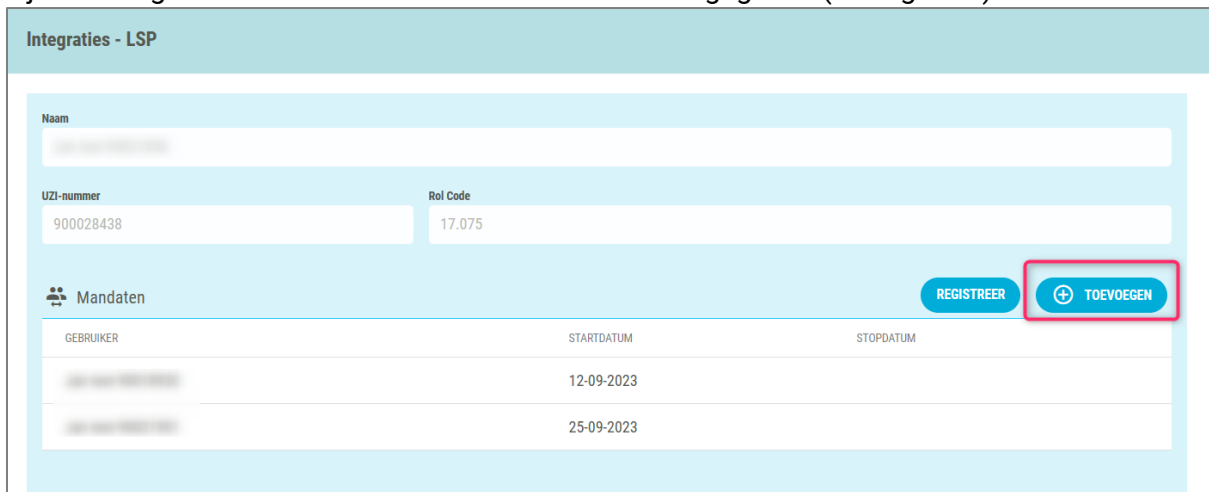

GEBRUIKER	STARTDATUM	STOPDATUM
[redacted]	12-09-2023	
[redacted]	25-09-2023	


Figuur 4 Instellingen/ LSP

De gebruiker kan dan op de registreren knop klikken en een pas registreren. Alleen gebruikers met een UZI-pas die direct het LSP mag benaderen, zoals apothekers, mogen andere, bijvoorbeeld assistenten mandateren. En mandaat wordt uitgereikt door op de blauwe knop 'toevoegen' te klikken, onderstaand scherm wordt weergegeven (Figuur 5).

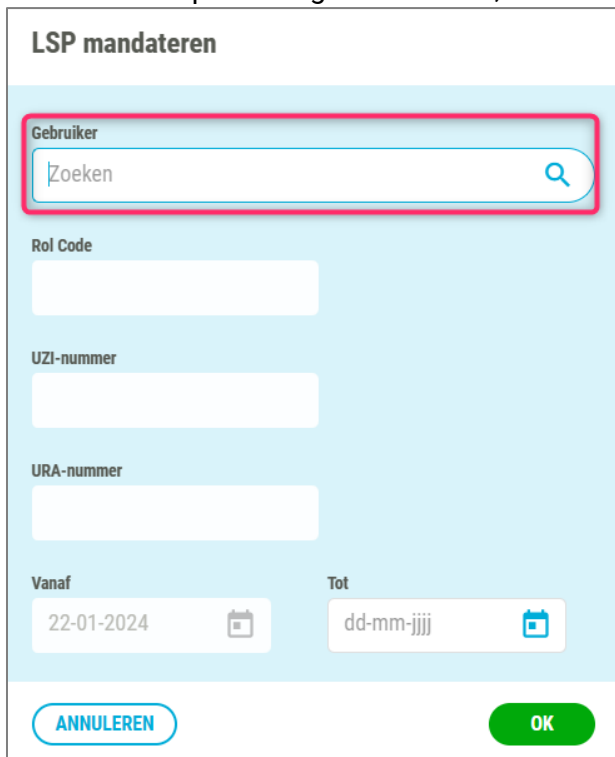

Figuur 5 LSP Mandateren

Selecteer de juiste gebruiker. Onderstaande gegevens worden weergegeven (Figuur 6).

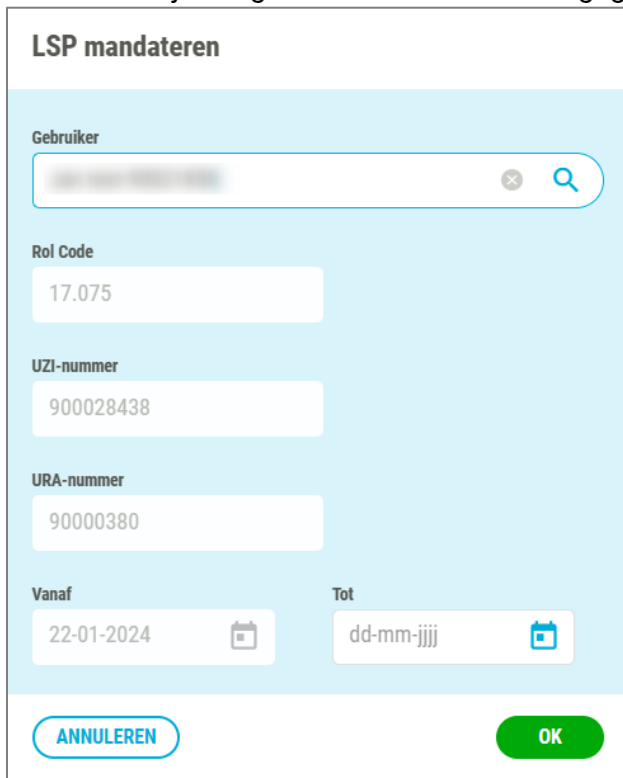

LSP mandateren

Gebruiker
 ✕ 🔍

Rol Code

UZI-nummer


URA-nummer

Vanaf 📅 Tot 📅

ANNULEREN OK

Figuur 6 LSP mandateren gegevens

Klik op de groene knop 'ok'. Vervolgens dient de pincode ingevoerd te worden (Figuur 7).

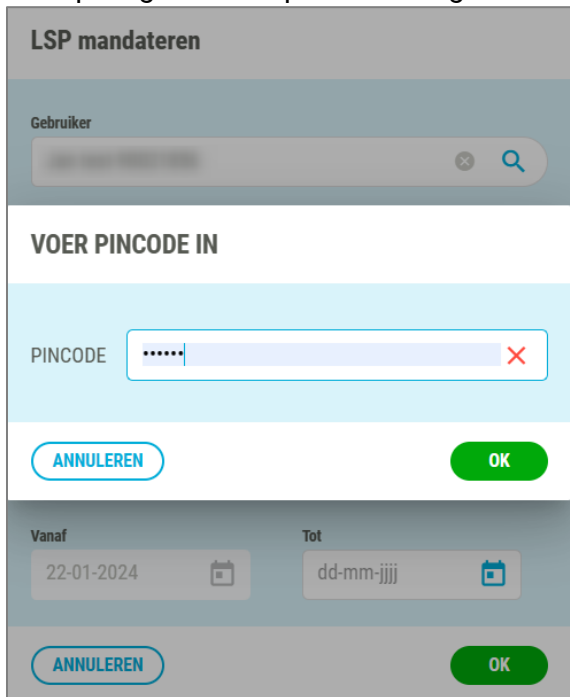

LSP mandateren

Gebruiker
 ✕ 🔍

VOER PINCODE IN

PINCODE ✕

ANNULEREN OK

Vanaf 📅 Tot 📅

ANNULEREN OK

Figuur 7 Pincode

De gebruiker is toegevoegd (Figuur 8).

Integraties - LSP

Naam

UZI-nummer Rol Code

 Mandaten REGISTREER + TOEVOEGEN

GEBRUIKER	STARTDATUM	STOPDATUM
900028438	12-09-2023	
900028438	22-01-2024	
900028438	25-09-2023	

Figuur 8 Gebruiker toegevoegd

2.3 SmartMed Extensies en UZI drivers

Om de UZI-pas te kunnen uitlezen, is de SmartMed extensie in de browser nodig alsook de SmartMed UZI drivers lokaal op de pc. Zie hiervoor de '[Beheerhandleiding F6 Printer en UZI pas](#)'.

De SmartMed extensie kan ook via deze link toegevoegd worden:


<https://chromewebstore.google.com/detail/smartmed/cnmkammkrgbholejljmbcdgffecdlllepi>

Dit is de nieuwste versie van de extensie.

3 Toestemming Mitz

Indien de patiënt nog geen toestemming voor Mitz heeft gegeven, kan de apotheek dit samen met de patiënt regelen.


Vanuit het menu , bij Patiënten/ Patiënt Beheren, kan de betreffende patiënt worden gezocht (zie Figuur 9).

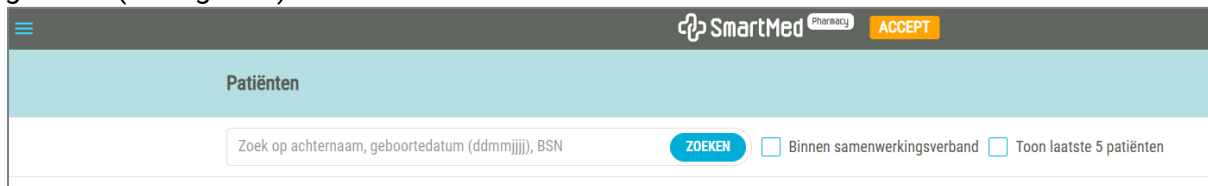

Figuur 9 Patiënt Beheren

3.1 Diensten en toestemmingen


Ga vervolgens naar het tabblad 'Patiënt' en kies voor "Diensten en toestemmingen"
 Klik vervolgens onder 'Toestemming door Mitz' op de blauwe knop "registratie toestemming" (zie rode kader in Figuur 10).

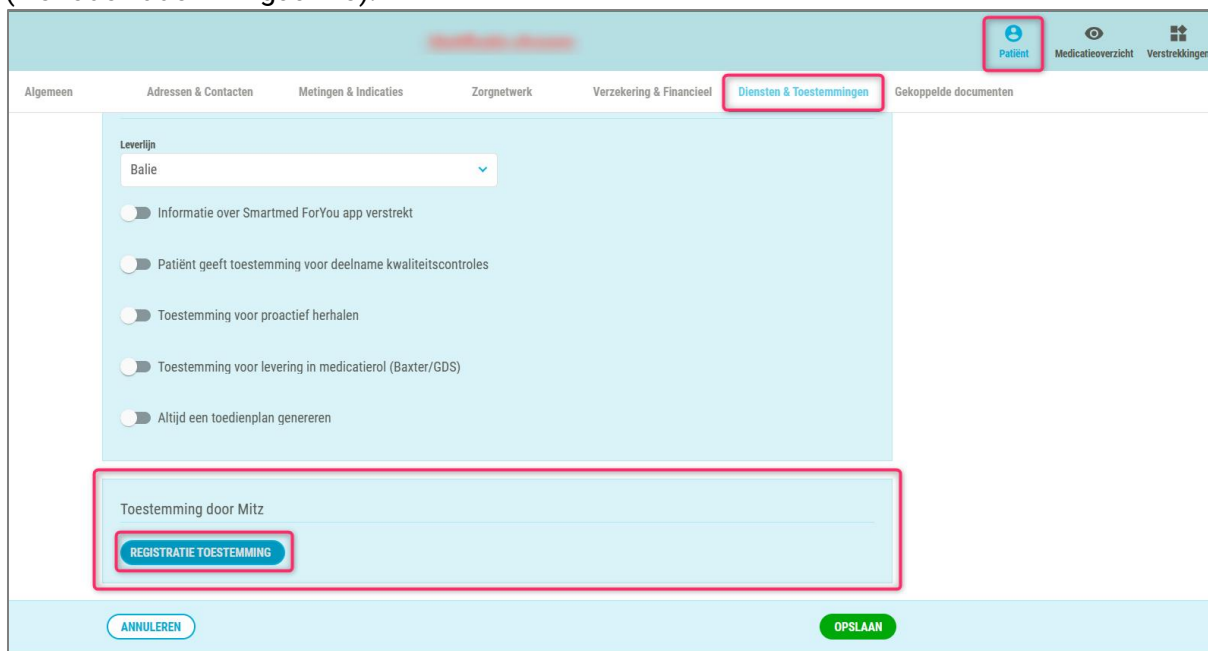

Figuur 10 Diensten en toestemmingen

Onderstaand scherm wordt weergegeven (Figuur 11).


Selecteer de juiste verantwoordelijke en klik op de groene knop 'ok'.

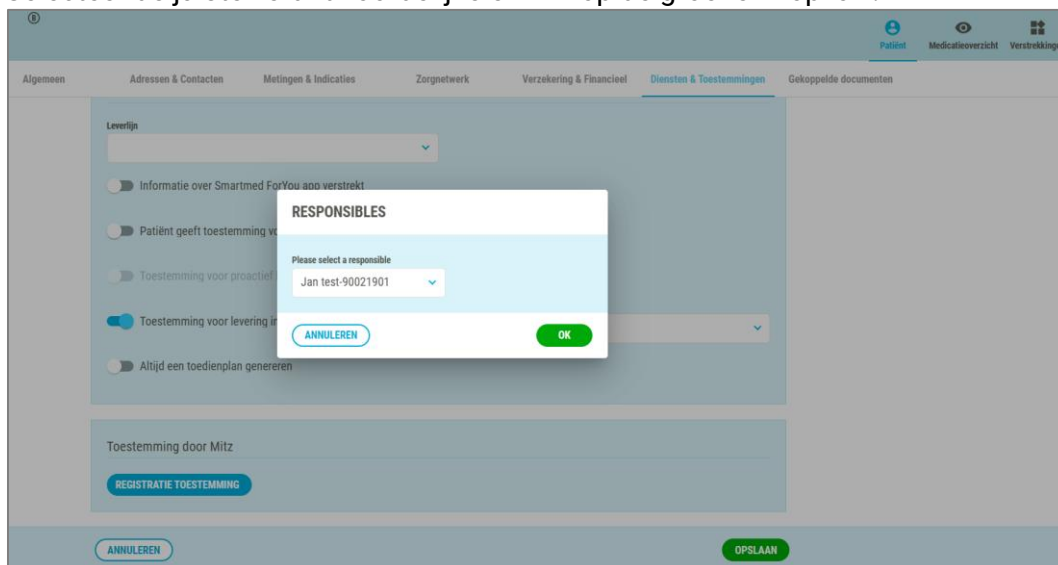

Figuur 11 Responsibles


3.2 Mitz omgeving

Vanuit Farmasys 6 wordt je nu doorgestuurd naar de Mitz-omgeving (zie Figuur 12). Klik op de blauwe knop 'Akkoord en doorgaan'.

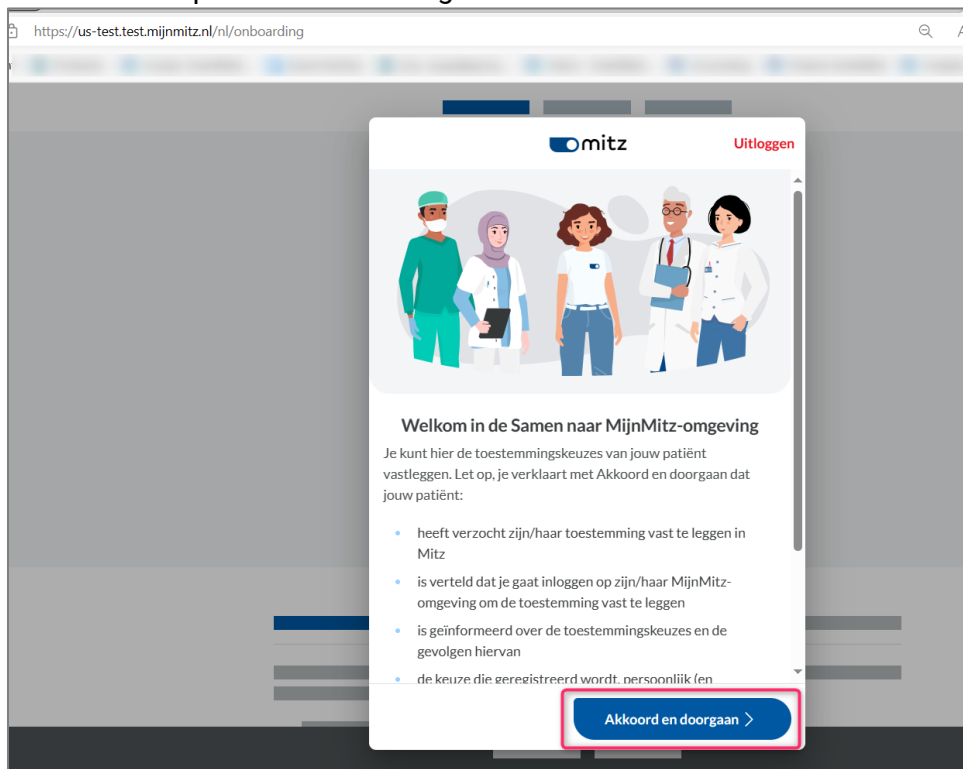

Figuur 12 Mitz omgeving


Onderstaand scherm wordt weergegeven (Figuur 13). Klik op de blauwe knop 'Keuze doorgeven'.

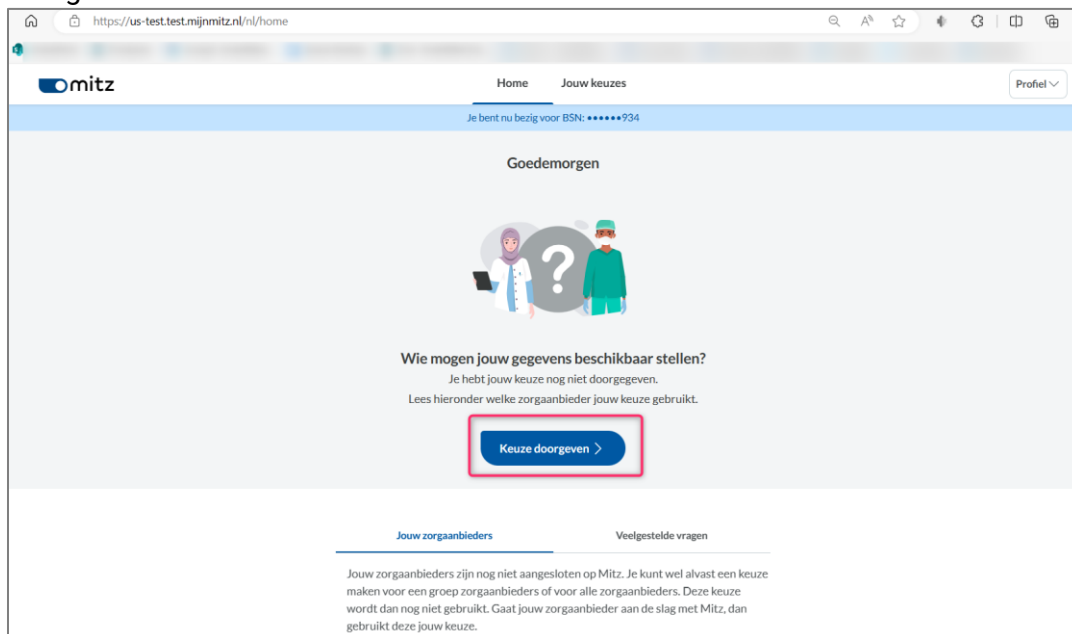

Figuur 13 Keuze doorgeven

3.3 Keuze Mitz toestemming

Onderstaand scherm wordt weergegeven (Figuur 14).

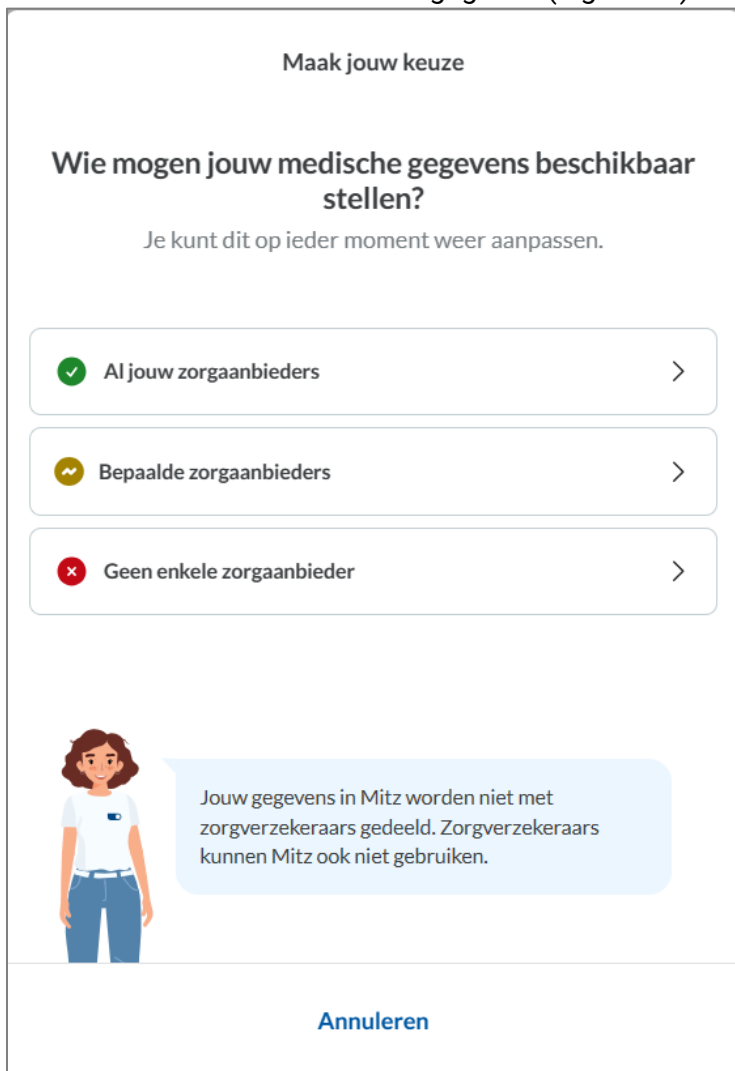

Maak jouw keuze

Wie mogen jouw medische gegevens beschikbaar stellen?

Je kunt dit op ieder moment weer aanpassen.

- ☒ Al jouw zorgaanbieders
- ☐ Bepaalde zorgaanbieders
- ☐ Geen enkele zorgaanbieder

Jouw gegevens in Mitz worden niet met zorgverzekeraars gedeeld. Zorgverzekeraars kunnen Mitz ook niet gebruiken.

Annuleren

Figuur 14 Keuze opties

Er kan een keuze worden gemaakt uit de volgende 3 opties;


- Al jouw zorgaanbieders
- Bepaalde zorgaanbieders
- Geen enkele zorgaanbieder

Zie voor meer informatie <https://www.mitz-toestemming.nl/>

De keuze van de patiënt is nu geregistreerd. Via het Mijn Mitz portaal (<https://www.mijnmitz.nl/>) (inloggen met DidigD) kan de patiënt zijn toestemming beheren.

3.4 Foutmelding en hulp

Krijgt u onverhoopt een foutmelding? Neem dan contact op met Mitz via info@mijnmitz.nl

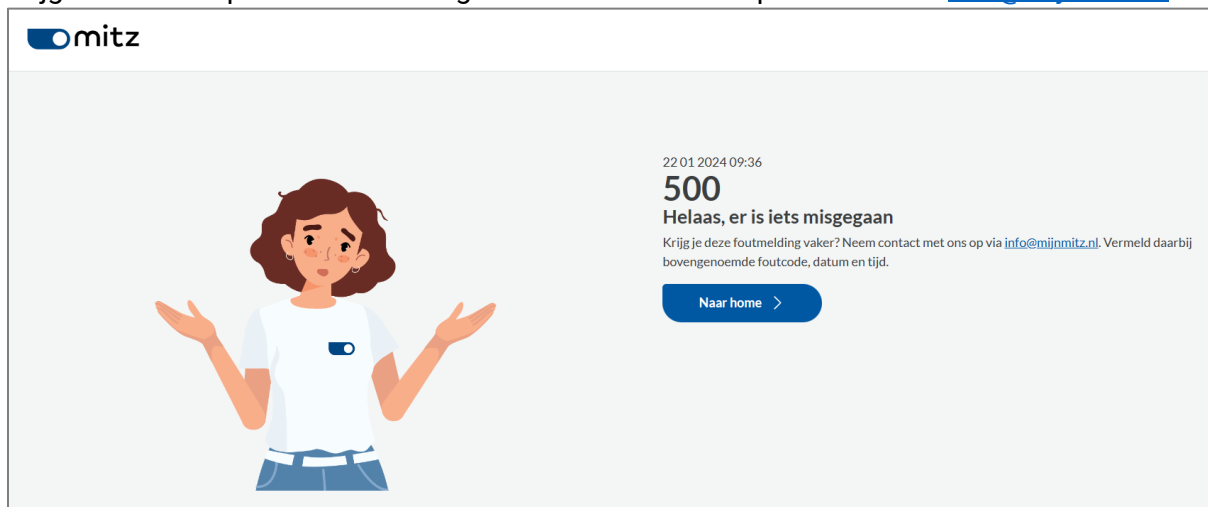


Figuur 15 Foutmelding Mitz

3.4.1 RegistratieToken

Bij nieuwe patiënten kan het systeem een foutmelding geven over een RegistratieToken (zie Figuur 16). Hiervoor is een tool ontwikkeld waarvoor de apotheker instructies heeft ontvangen en kan dit middels zijn laptop uitvoeren. De procedure hiervoor is als volgt:

- Zorg ervoor dat de UZI pas aanwezig is in de kaartlezer.
- Er staat een icoon op de desktop met 'Token' in de naam, start die applicatie op.
- Er wordt gevraagd om in te loggen, gebruik daarvoor gebruikersnaam en wachtwoord.
- Er wordt gevraagd om de pincode van de UZI pas in te voeren.
- De tool zal de registratie tokens gaan aanmaken en aangeven hoever dat deze is.

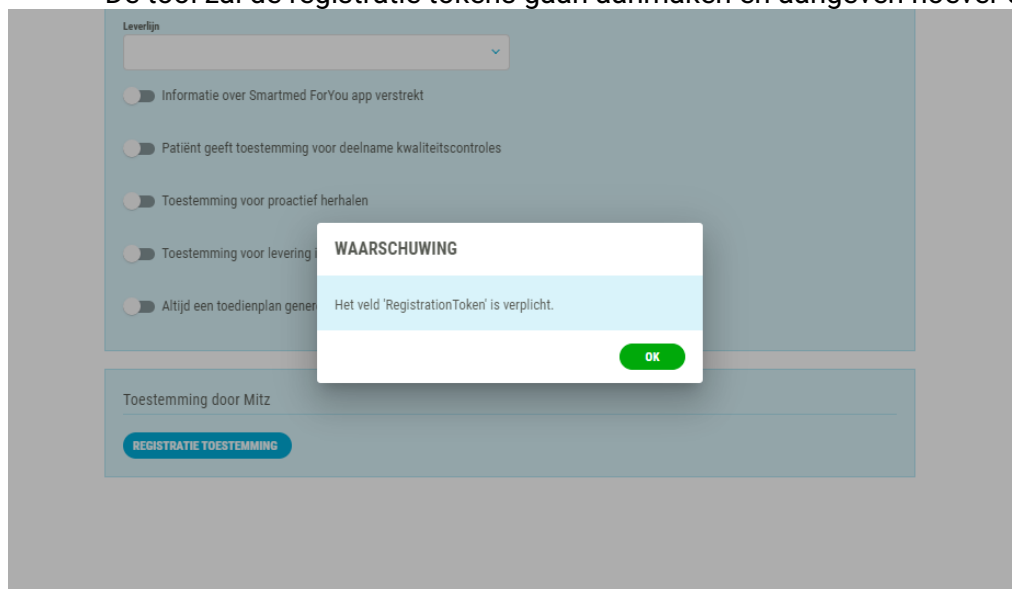

Figuur 16 Foutmelding RegistratieToken